

3M Επιστήμη.
Εφαρμοσμένη στη ζωή μας.™

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Συγκολλητικός παράγοντας

**Ο αυθεντικός,
τώρα καλύτερος
από ποτέ!**



Ο συγκολλητικός παράγοντας που εμπιστεύεστε...

Ο συγκολλητικός παράγοντας 3M™ Scotchbond™ Universal Plus προάγει τους συγκολλητικούς παράγοντες universal στο επόμενο επίπεδο.

Διατηρεί όλα τα οφέλη του πρωτότυπου συγκολλητικού παράγοντα universal 3M™ Scotchbond™, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τον έλεγχο και την προβλεψιμότητα, καθώς ένας καλός συγκολλητικός παράγοντας πρέπει να παρέχει κάτι περισσότερο από έναν ισχυρό δεσμό.

5 βήματα εμπρός από τον αρχικό


- Ο πρώτος universal ακτινοσκιερός συγκολλητικός παράγοντας
- Ισχυρός δεσμός και αποτελεσματική κάλυψη της προσβεβλημένης οδοντίνης
- Ισχυρός δεσμός προς οδοντικά και αποκαταστατικά υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων των υαλοκεραμικών
- Συμβατότητα με υλικά διπλού πολυμερισμού ή αυτοπολυμεριζόμενα χωρίς την χρήση του DCA(dual cure activator)
- Χωρίς παράγωγα BPA όπως BisGMA



Plus, ο αυθεντικός Scotchbond Universal συγκολλητικός με τα διάσημα και γνωστά χαρακτηριστικά του

Καθολικά κατάλληλο

- ✓ Όλες οι τεχνικές αδροποίησης
- ✓ Άμεσα
- ✓ Έμμεσα

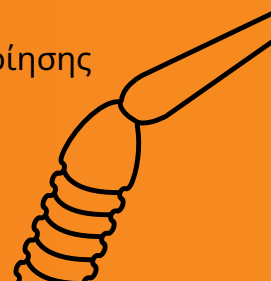

... τώρα θέτει νέα δεδομένα

Ελάχιστα επεμβατική οδοντιατρική




Προστέθηκε ακτινοσκιερότητα

Η ακτινοδιαπερατότητα σε μια υπάρχουσα αποκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση και επεμβατική υπερθεραπεία. Ο συγκολλητικός παράγοντας 3M™ Scotchbond™ Universal Plus είναι **ο πρώτος ακτινοσκιερός συγκολλητικός παράγοντας** με ακτινοσκιερότητα τύπου οδοντίνης που βοηθά στο να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα.

“ Αυτές οι ακτινογραφίες που έχεις αμφιβολίες συμβαίνουν κάθε μέρα. Το πιο συχνό και κρίσιμο βήμα σε ακτινογραφία για όμορο κιβωτίδιο ταξης II.”

- Καθ. Dr. Angelo Putignano, Πανεπιστήμιο Μάρκε-Ανκόνα, Ιταλία

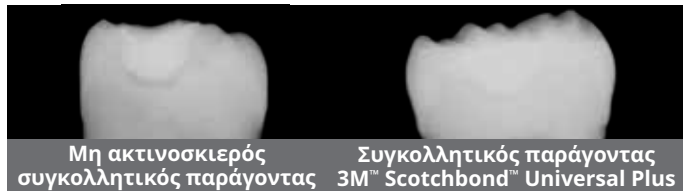

Σκόπιμη συγκολλητική συγκέντρωση υπό αποκαταστάσεις κατηγορίας I - ακτίνες ελαχθέντων ανθρώπινων γομφίων, υλικό πλήρωσης 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Ρητίνη Αποκαταστάσεων Μαζικής Πλήρωσης, K. Dede et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020 - 3M internal data, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020



“ Ο ακτινοδιαπερατός συγκολλητικός παράγοντας κάτω από κάθε αποκατάσταση διπλασιάζει το ρίσκο για αντικατάσταση της αποκατάστασης.

- Dr. John O. Burgess, Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, ΗΠΑ

Δεσμός και κάλυψη της προσβεβλημένης οδοντίνης- “the seal is the deal”

Ο συγκολλητικός παράγοντας Scotchbond Universal Plus σας εμπνέει **εμπιστοσύνη κατά την εκτέλεση ελάχιστα επεμβατικών οδοντιατρικών πράξεων** επειδή δημιουργεί εξίσου ισχυρό δεσμό και σε προσβεβλημένη αλλά και σε υγιή οδοντίνη.

Εκτός από την εξαιρετική ποιότητα των ορίων αποκατάστασης, καλύπτει αποτελεσματικά την προσβεβλημένη οδοντίνη δημιουργώντας έναν ξεκάθαρο, χωρίς φυσαλίδες, υβριδικό υμένα - γιατί “the seal is the deal” για αποφυγή δευτερεύοντος τερηδονισμού.

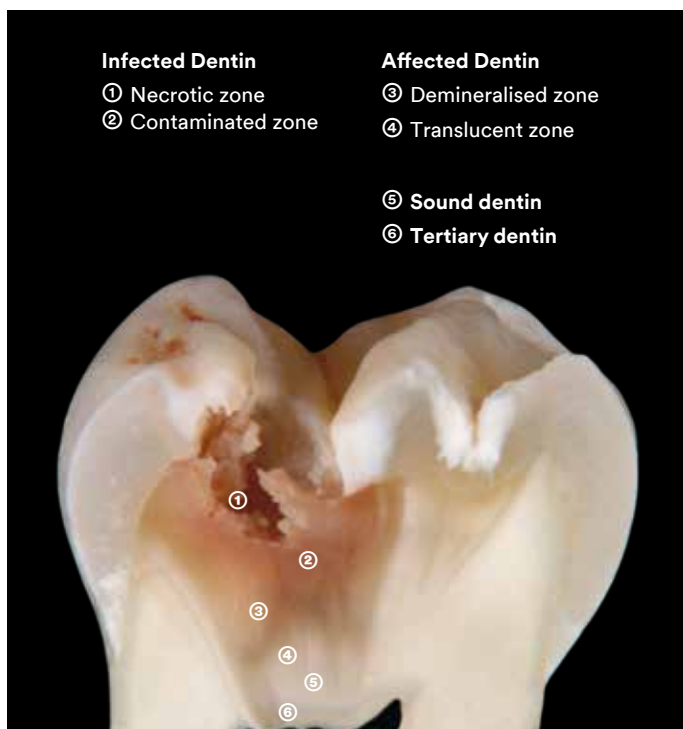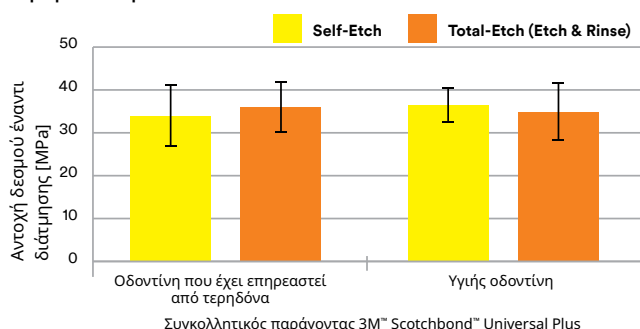

Αντοχή δεσμού έναντι διάτμησης σε οδοντίνη με τερηδόνα και σε υγιή οδοντίνη - C. Thalacker, et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020

Ζώνες τερηδόνας - Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά του Καθ. Leandro Hilgert και του Καθ. Soraya Leal, Πανεπιστήμιο Βραζιλίας (UnB), Βραζιλία

Δημιουργεί δεσμό με όλα τα αποκαταστατικά υλικά

Χωρίς να χρειάζονται επιπλέον primers.

Σχεδόν καθόλου μετεμφρακτική ευαισθησία


99%

των οδοντιάτρων ανέφεραν ότι ο **συγκολλητικός παράγοντας 3M™ Scotchbond™ Universal Plus** δεν εμφανίζει σχεδόν καμία μετεμφρακτική ευαισθησία*

* Αξιολόγηση πεδίου με 309 οδοντιάτρους και πάνω από 20.000 εφαρμογές

Ισχυρός δεσμός σε υαλοκεραμικά υλικά

Ο συγκολλητικός παράγοντας Scotchbond Universal Plus επιτυγχάνει τον υψηλό δεσμό πρότυπο των παραδοσιακών, ξεχωριστών σιλανίων.

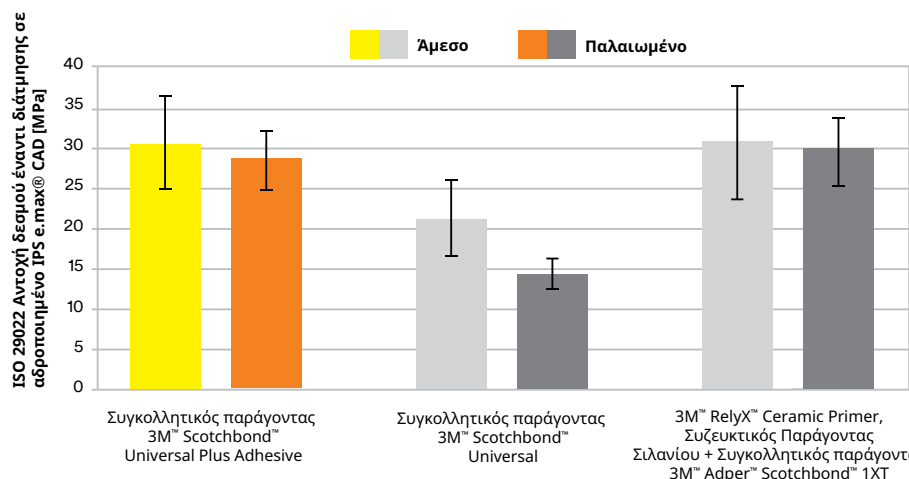

Συμπέρασμα αναφοράς:

Ο συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης 3M[™] Scotchbond[™] Universal Plus είχε καλύτερη απόδοση από τον συγκολλητικό παράγοντα γενικής χρήσης 3M[™] Scotchbond[™] Universal ως προς τη συγκόλληση σε υαλοκεραμικό (IPS e.max[®] CAD, Ivoclar Vivadent).

Αντοχή δεσμού έναντι διάτμησης σε υαλοκεραμικό – Καθ. Dr. Bart van Meerbeek και συνεργάτες, KU Leuven, Βέλγιο, Αναφορά στη 3M, 2020

Πλήρες ευθυγραμμισμένο σύστημα με τη ρητινώδη κονία γενικής χρήσης 3M[™] RelyX[™] Universal

Εξαιρετική ισχύροτητα συγκόλλησης για σχεδόν όλες τις ενδείξεις μιας διπλού πολυμερισμού ρητινώδους κονίας. Απλοποιημένη διαδικασία στην καθημερινότητα σας – συγκολλητικός παράγοντας και με ρητινώδης κονία γενικής χρήσης RelyX.



Πληροφορίες παραγγελίας

Αρ. είδους Πληροφορίες προϊόντος

Φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 3M[™] Scotchbond[™] Universal Plus

41293	Φιαλίδιο κιτ εισαγωγής 1 φιαλίδιο 5ml, 50 Βουρτσάκια μιας χρήσης, 1 σύριγγα αδροποιητή 3ml, 25 ρύγχη τοποθέτησης
41294	Ανταλλακτικό φιαλίδιο – 1 φιαλίδιο των 5ml
41263	Αδροποίηση γενικής χρήσης 3M[™] Scotchbond[™] 2 σύριγγες των 3 ml, 50 ρύγχη τοποθέτησης

Συγκολλητικός παράγοντας 3M[™] Scotchbond[™] Universal Plus – Μονή δόση

41297	Κιτ εισαγωγής μονής δόσης 50 μονές δόσεις, 1 σύριγγα αδροποίησης 3ml, 25 ρύγχη τοποθέτησης
41304	Μονή δόση 400 400 μονές δόσεις, 1 σύριγγα αδροποίησης 3ml, 25 ρύγχη τοποθέτησης



Φιαλίδιο
με λεία και
ομοιόμορφη
επιφάνεια



Μονή δόση

για αποτελεσματική διαχείριση της υγιεινής – μειώνει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης